Návod k použití - Límec pro PSY

Milý majiteli čtyřnohého chlupáče,

děkujeme za zakoupení VETlímce. Držíme palce, aby rekonvalescence Tvého miláčka dopadla na výbornou! Nyní ještě pár rad, jak VETlímec používat!

1. SPRÁVNÁ VELIKOST

Aby vše fungovalo tak, jak má, je zapotřebí vybrat správnou velikost límce. Tu již jistě máte, buď jste límec vyzkoušeli v ordinaci svého veterinárního lékaře nebo jste jej zakoupili po poradě s odborníky z firmy VETlímce s.r.o. Pro jistotu zopakujeme základní pravidlo – límec musí být vždy delší než zvířecí čumáček, a to zhruba o 4 cm vleže!


2. PŘIZPŮSOBENÍ LÍMCE

K upevnění a nastavení velikosti límce slouží suché zipy (A), které se nachází na vnějším obvodu límce a v oblasti krku.

3. ZABEZPEČTE LÍMEC PROTI SUNDÁNÍ


Navlékněte obojek do poutek na krku (B) a zapněte jej. Na toto důležité opatření nezapomínejte! Díky němu se ani aktivnější pejsek z límce nedostane! Obojek musí být zajištěn tak, aby jej zvíře nemohlo přetáhnout přes hlavu a límec spolu s ním stáhnout! Límce větších rozměrů jsou opatřeny bezpečností přezkou, kterou je potřeba též pečlivě zapnout.

A- Suché zipy
B- Poutka na obojek

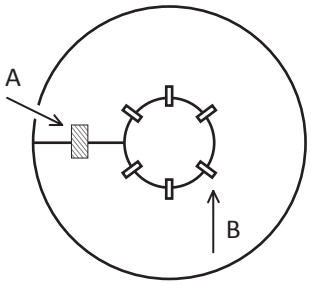

ÚDRŽBA: Límec je vyroben z molitanu a omyvatelné kočárkoviny, proto jej v případě potřeby perte v ruce s použitím jemného čistícího prostředku.

UPOZORNĚNÍ: Nenechávejte psa bez dozoru, za kvalitu výrobku si stojíme, jako výrobce však neneseme zodpovědnost za použití límce, ani za jakoukoliv případnou újmu zvířete, zakoupením a používáním výrobku toto berete na vědomí a vyjadřujete souhlas. Náš límec je skvělý pomocník, ale nic – žádný límec na světě – nevynahradí pejskovi pozornost a ostražitost majitele, kterou k uzdravení potřebuje.

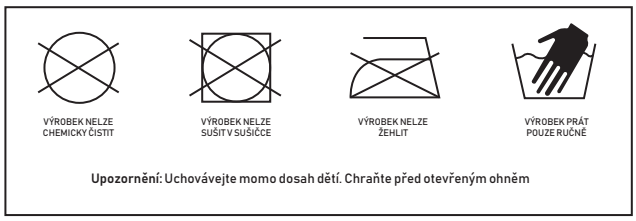

Výrobce: VETlímce s.r.o., Cukrovarská 3006/20, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň, IČO: 11979160
Kontakty: info@vetlimce.cz, www.vetlimce.cz, FB: VETlímce – pooperační límce pro psy a kočky